

CAV CELL INTRA PLUS



# Cav Cell Intra Plus



# Cav Cell Intra Plus



*Cav Cell Intra Plus, un dispositivo all'avanguardia concepito secondo le più aggiornate conoscenze tecnologiche e ampiamente testato in campo medico estetico. Trattamenti mirati non invasivi e mini invasivi, che consentono di mantenere o ripristinare un aspetto armonioso, valorizzando le forme ed esaltando una bellezza pulita e naturale, sempre mantenendo alti livelli di comfort e sicurezza sia per il professionista che per il paziente.*



## TECNOLOGIE

Lipoemulsificazione Ultrasonica Sottocutanea, Idrolipoclasia Transdermica e Cavitazione Transdermica in Medicina Estetica

## TRATTAMENTI FRUIBILI



### ADIPOSITÀ LOCALIZZATE

*Cuscinetti, maniglie dell'amore, accumuli adiposi su braccia e gambe, grasso addominale...*



### INestetismi DELLA CELLULITE

*Cellulite, pelle a buccia d'arancia...*



Trattamento di accumuli adiposi



Trattamento della cellulite



Trattamento del grasso addominale




Trattamento di pancia e fianchi

## IL DISPOSITIVO

Cav Cell Intra Plus è un'apparecchiatura che rappresenta l'evoluzione del concetto di "ultrasuoni", efficace nell'attenuazione e riduzione volumetrica degli accumuli adiposi localizzati. Il dispositivo è caratterizzato dalla possibilità di intervenire a livello sottocutaneo attraverso un trasduttore per la soft-liposcultura. L'effetto cavitazionale sottocutaneo emulsiona il "grasso" che una volta reso fluido viene metabolizzato naturalmente.

## IN DOTAZIONE

- N.01 cavo alimentazione
- N.01 footswitch
- N.01 trasduttore da 60 mm
- N.01 trasduttore da 80 mm
- N.01 trasduttore sottocutaneo
- N.03 cannule L1 250 mm
- N.03 cannule L2 350 mm
- N.01 protezione sterile per sonda

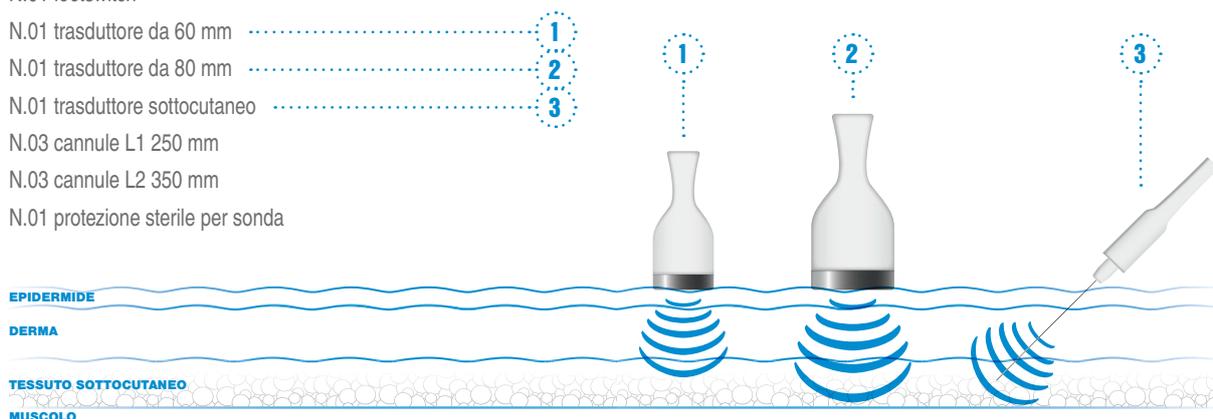

## PLUS



In tutti i trasduttori è prevista la funzione ECO SCAN DETECTOR per la determinazione della potenza e frequenza ottimale calcolate in base al tessuto bersaglio. Il sistema rileva e quantizza l'assorbimento sonico per cui, in base ai parametri rilevati, modula la potenza e la frequenza più bassa corrisponde terapia più profonda). Questo sistema consente di agire in maniera ottimale sia nella struttura fibrotica del "grasso" sia nei piani più superficiali del pannicolo adiposo, senza interferire con il sistema vascolare linfatico.



Il paziente è in grado di riprendere le normali attività quotidiane immediatamente.



L'apparecchiatura è facilmente trasportabile.



Tutti i parametri sono visualizzati su un display 10.1" color touch screen.



Il software è redatto secondo il concetto Friendly Human-Machine Interface [FHMI] per renderlo intuitivo e di agevole utilizzo.

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz

Max assorbita 450 W

Classe di sicurezza elettrica II BF

Grado di protezione IP IP40

Frequenza Ultrasuoni 28÷46 kHz impostabile da software

Densità di Potenza Ultrasuoni Max 3 W/cm<sup>2</sup>

Display 10.1" colour touch con PC integrato

Temperatura di funzionamento 0÷40 °C

Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa

Dimensioni L 45 x A 96 x P 41 cm

Peso 10 kg


PRODOTTO IN ITALIA



Apparecchiatura certificata **MEDICAL DEVICE** in conformità  
alla direttiva 2007/47/CE correttiva della direttiva 93/42/CE

*Top Quality Aesthetic si riserva di variare i dati ivi riportati senza preavviso  
e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali.*

[www.topqualityaesthetic.it](http://www.topqualityaesthetic.it)

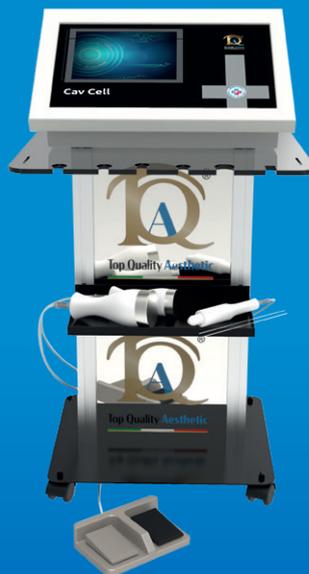

Prodotto da **TOP QUALITY GROUP** Srl  
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy  
info@topqualitygroup.it  
[www.topqualitygroup.it](http://www.topqualitygroup.it)



Distribuito da **TOP QUALITY AESTHETIC** Srl  
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy  
+39 075 8520088 | info@topqualityaesthetic.it  
[www.topqualityaesthetic.it](http://www.topqualityaesthetic.it)