

HIFU-TOP VISO



Hifu-Top Viso





Hifu-Top viso

Hifu-Top Viso, un dispositivo all'avanguardia concepito secondo le più aggiornate conoscenze tecnologiche e ampiamente testato in campo medico estetico. Trattamenti mirati e non invasivi, che consentono di mantenere o ripristinare un aspetto armonioso, valorizzando le forme e rispettando l'espressività e i lineamenti originali. Una bellezza pulita e naturale, sempre mantenendo alti livelli di comfort e sicurezza sia per il professionista che per il paziente.



TECNOLOGIE

Ultrasuoni Focalizzati ad Alta Intensità
ed Elettroporazione in Medicina Estetica

TRATTAMENTI FRUIBILI



RUGHE E MICRO-RUGHE

Rughe frontali, zampe di gallina, rughe perioculari, pieghe naso-labiali, rughe perilabiali...



RILASSAMENTI E IPOTONIE

Cedimenti da dimagrimento, lassità di mento e guance, doppio mento, rilassamenti palpebrali...



INESTETISMI DELLA TEXTURE CUTANEA

Pelle ruvida e invecchiata...



Trattamento delle rughe di viso e collo



Trattamento di rughe e doppio mento



Trattamento delle rughe di viso e collo



Trattamento delle rughe del viso

IN DOTAZIONE

N.01 cavo di alimentazione

N.01 trasduttore HIFU

N.01 cartuccia 1,5 mm 1

N.01 cartuccia 3 mm 2

N.01 cartuccia 4,5 mm 3

N.01 cavo per elettroporazione

N.01 trasduttore elettroporazione medicale 4

N.01 cavo per connessione trasduttore elettroporazione medicale


N.01 piastra in daino per elettroporazione

N.01 cavo per connessione piastra in daino per elettroporazione

N.03 siringhe Pic 5 ml

N.01 valigia porta accessori

N.01 fascia elastica

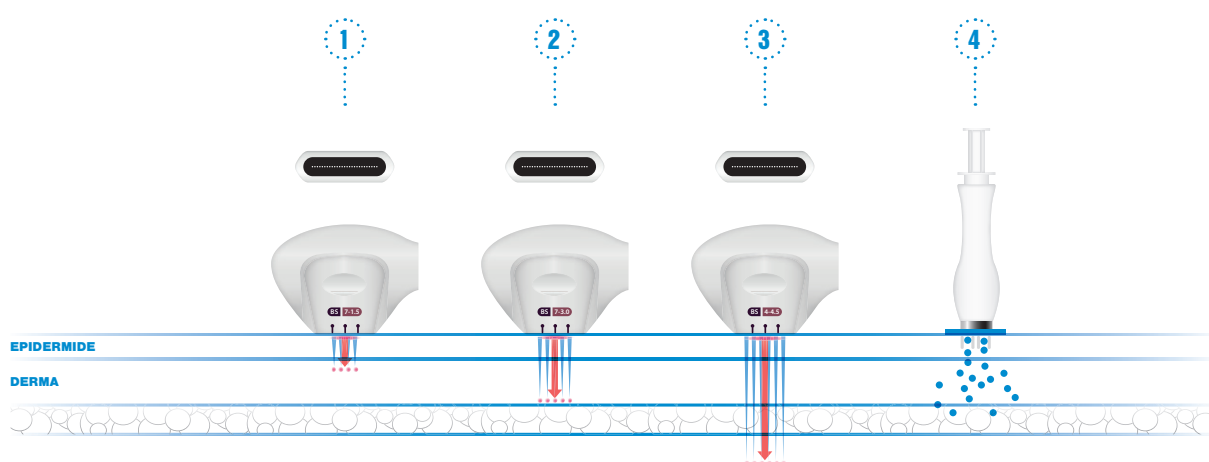

PLUS



3 cartucce (VISO 1.5 mm, 3.0 mm, 4.5 mm) che agiscono su diverse profondità della pelle. L'energia oltrepasserà l'epidermide senza lasciare esiti.



Facile da controllare e gestire.



Scansione automatica (settabile da software) degli spot di energia.



Tutti i parametri sono visualizzati su un display 10.1" color touch screen.



Il software è redatto secondo il concetto Friendly Human-Machine Interface [FHMI] per renderlo intuitivo e di agevole utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz

Potenza Max assorbita 250 W

Classe di sicurezza elettrica II BF

Grado di protezione IP IP40

Frequenza Ultrasuoni 4 MHz, 7 MHz

Densità di Potenza Ultrasuoni Max 3 W/cm²

Tensione Max elettroporazione 120 V @ 1000 ohm

Freq. Impulsi elettroporazione 1÷3000 Hz, impostabile da software

Display 10.1" colour touch con PC integrato

Temperatura di funzionamento 0÷40 °C

Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa

Dimensioni L 45 x A 96 x P 41 cm

Peso 6 kg

PRODOTTO IN ITALIA



*Apparecchiatura certificata MEDICAL DEVICE in conformità
alla direttiva 2007/47/CE correttiva della direttiva 93/42/CE*

*Top Quality Aesthetic si riserva di variare i dati ivi riportati senza preavviso
e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali.*

www.topqualityaesthetic.it



Prodotto da **TOP QUALITY GROUP** Srl
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy
info@topqualitygroup.it
www.topqualitygroup.it



Distribuito da **TOP QUALITY AESTHETIC** Srl
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy
+39 075 8520088 | info@topqualityaesthetic.it
www.topqualityaesthetic.it