

VELVET SKIN



# Velvet Skin



# Velvet Skin



Velvet Skin, un dispositivo all'avanguardia concepito secondo le più aggiornate conoscenze tecnologiche e ampiamente testato in campo medico estetico. Trattamenti mirati e non invasivi, che consentono di mantenere o ripristinare un aspetto armonioso, valorizzando le forme e rispettando l'espressività e i lineamenti originali. Una bellezza pulita e naturale, sempre mantenendo alti livelli di comfort e sicurezza sia per il professionista che per il paziente.



## TECNOLOGIE

Radiofrequenza Capacitiva e Resistiva  
in Medicina Estetica

## TRATTAMENTI FRUIBILI



### RUGHE E MICRO-RUGHE

Rughe frontali, zampe di gallina, rughe periorculari, pieghe naso-labiali, rughe perilabiali...



### RILASSAMENTI E IPOTONIE

Ipotonie muscolari, cedimenti da dimagrimento, lassità di mento e guance, cedimenti di seno e braccia...



### ADIPOSITÀ LOCALIZZATE

Cuscinetti, maniglie dell'amore, accumuli adiposi su braccia e gambe, grasso addominale...



### INestetismi DELLA TEXTURE CUTANEA

Acne, smagliature, disidratazione cutanea...



### INestetismi DELLA CELLULITE

Cellulite, pelle a buccia d'arancia...



Trattamento delle rughe



Trattamento della cellulite

## IN DOTAZIONE

N.01 cavo di alimentazione

N.01 fascia elastica

N.01 trasduttore RF monopolare viso ..... 1

N.01 elettrodo viso dim.10mm ..... 1

N.01 elettrodo viso dim. 25mm ..... 1

N.01 porta elettrodi in plexiglass

N.01 trasduttore RF monopolare e bipolare corpo ..... 2

N.01 piastra in acciaio

N.01 cavo piastra acciaio


N.01 trasduttore RF bipolare viso a 2 punte retrattili ..... 3

EPIDERMIDE

DERMA

TESSUTO SOTTOCUTANEO

MUSCOLO

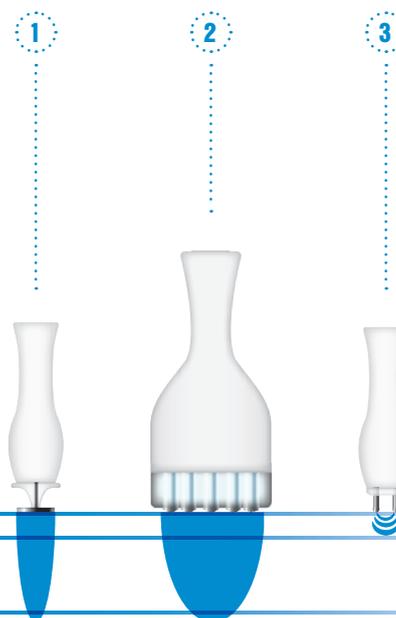

## PLUS



Feedback dell'impedenza del distretto in trattamento, che consente l'adattamento dei parametri di terapia alle condizioni individuali del paziente.



Possibilità di settare via software due frequenze: 500 kHz per patologie a maggior profondità e 1 MHz per patologie più superficiali.



Possibilità di settare via software la modalità monopolare o bipolare grandi distretti senza cambiare i trasduttori.



Possibilità di settare via software la modalità capacitiva o resistiva senza cambiare i trasduttori.



Trasduttori capacitivi senza vernice epossidica.



Programmi preimpostati secondo patologie e distretti.



Tutti i parametri sono visualizzati su un display 10.1" color touch screen.



Il software è redatto secondo il concetto Friendly Human-Machine Interface [FHMI] per renderlo intuitivo e di agevole utilizzo.

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz

Potenza Max assorbita 450 W

Classe di sicurezza elettrica II BF

Grado di protezione IP IP40

Potenza max in uscita RF 150 W @ 50 ohm

Frequenza di emissione RF 500 kHz, 1000 kHz impostabile da software

Tipologia di emissione Capacitiva / Resistiva

Funzioni Monopolare / Bipolare

Display 10.1" colour touch con PC integrato

Temperatura di funzionamento 0÷40 °C

Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa

Dimensioni L 45 x A 96 x P 41 cm

Peso 7 kg

PRODOTTO IN ITALIA



Apparecchiatura certificata *MEDICAL DEVICE* in conformità  
alla direttiva 2007/47/CE correttiva della direttiva 93/42/CE

*Top Quality Aesthetic si riserva di variare i dati ivi riportati senza preavviso  
e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali.*

[www.topqualityaesthetic.it](http://www.topqualityaesthetic.it)



Prodotto da **TOP QUALITY GROUP** Srl  
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy  
info@topqualitygroup.it  
[www.topqualitygroup.it](http://www.topqualitygroup.it)



Distribuito da **TOP QUALITY AESTHETIC** Srl  
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy  
+39 075 8520088 | info@topqualityaesthetic.it  
[www.topqualityaesthetic.it](http://www.topqualityaesthetic.it)